

Der OPTIMA PostOp Verbandschuh dient ausschließlich zur Druckumverteilung und zum Schutz des betroffenen Fußes.

- > Zugelassene Aktivitäten und daraus resultierende Belastungen für den Fuß des Patienten müssen vom behandelnden Arzt vorgegeben werden.
- > Der OPTIMA PostOp Verbandschuh ist nicht für hohe Belastungen (z. B. Sport) geeignet.
- > Er darf ausschließlich von Fachpersonal (OSM oder OMM) angepasst und abgegeben werden.
- > Das Produkt ist nur für die Versorgung an jeweils einem Patienten zugelassen.
- > Die Gesamttragedauer sollte eine Nutzung über mehrere Monate nicht überschreiten.

Vorsicht

Beachten Sie bitte immer diese Gebrauchsanweisung. Bei Nebenwirkungen (z. B. Hautschwellung, Druckstellen, Blutzirkulationsstörungen usw.) informieren Sie bitte Ihren Arzt. Bei unsachgemäßer Handhabung des Produkts ist die Funktion und ein optimaler Schutz nicht mehr gewährleistet. Dieses Hilfsmittel dient der Genesung und ist ausschließlich unter der Anleitung Ihres Arztes oder einer medizinischen Fachkraft (bzw. in Rücksprache) zu verwenden. Die DARCO (Europe) GmbH übernimmt hierfür keine Verantwortung. Das Tragen von Verbandstoffen oder Socken im Schuh wird empfohlen. Während Sie dieses Hilfsmittel tragen, empfehlen wir Ihnen, kein Fahrzeug zu steuern. Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie Treppen steigen (z. B. auch den Bordstein betreten) und auf unebenen Wegen gehen. Gehen Sie langsamer als gewohnt. Dieses Hilfsmittel ist nur für die Anwendung an einem einzelnen Patienten vorgesehen.

Technische Daten

5 Größen: S (34 – 36), M (37 – 39), L (40 – 42), XL (43 – 45), XXL (46 – 48)
Rechts und links tragbar.

Farbe: Schwarz / Blau

Wartung: Das Produkt ist wartungsfrei.

Konstruktionsmerkmale:

Hoher Verbandschuh mit einstellbaren Komponenten, hohem Schaft mit hinterer, sehr fester, thermisch verformbarer Versteifung, waschbares und atmungsaktives Oberteil. Starre Brandsohle mit Flexions- und Torsionsschutz sowie Bewegungskontrolle und Verteilung der Druckbelastung.

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Richtlinie EU 2017/745.

Reinigungshinweise

Reinigen Sie den Verbandschuh nur mit lauwarmem oder kaltem Wasser und verwenden Sie milde Seife. Spülen Sie die Rückstände danach ab.

The OPTIMA PostOp wound care shoe is exclusively designed to redistribute pressure and protect the affected foot.

- > Permitted activities and any resultant stresses for the patient's foot have to be stipulated by the attending physician.
- > The OPTIMA PostOp wound care shoe is not suitable for high loads (e.g. sport).
- > It may only be adapted and dispensed by specialists.
- > The product is only certified for one individual patient's care.
- > Total wearing time should not exceed several months of use.

Caution

Please always follow these instructions for use. In case of adverse effects (e.g. skin swelling, pressure points, disorders of blood circulation etc.) please tell your doctor. Function and optimum protection are no longer guaranteed if the product is handled incorrectly. This aid assists recovery and should be used exclusively under the instruction of and in consultation with your doctor or a healthcare professional. DARCO (Europe) GmbH does not assume any responsibility. It is advisable to wear dressings or socks with the shoe. We recommend that you do not drive a vehicle while you are wearing this aid. Use extreme caution when climbing stairs (e.g. also stepping up onto curbs) and walking on uneven surfaces. Walk more slowly than usual. This aid is intended for single-patient use only.

Technical data

5 Sizes: S (34 – 36), M (37 – 39), L (40 – 42), XL (43 – 45), XXL (46 – 48)
The shoe fits right and left equally.

Colour: Black / Blue

Maintenance: The product requires no maintenance.

Construction features:

High wound care shoe with adjustable parts, high shaft with rear, very rigid, thermally deformable reinforcement, washable and breathable upper. Rigid inner sole with flexion and torsion protection plus motion control and distribution of pressure loading.

The product meets the requirements of Regulation EU 2017/745.

Cleaning instructions

Only clean the wound care shoe with lukewarm or cold water and use mild soap. Rinse off the residue afterwards.

OPTIMA PostOp



Distributor
DARCO (Europe) GmbH
Gewerbegebiet 18
82399 Raisting | Germany
Telefon +49 8807 9228-0 | Fax -22
info@darco.de | www.darco.de

OPTIMA MOLLITER SRL
Via Breda 19/21
I-62012 Civitanova Marche (MC)
Telefon +39 0733 8010-60 | Fax -48
info@optimamolliter.com
www.optimamolliter.com




1.



OPTIMA / SBi Insole 3 x 3

A

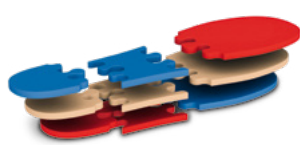

OPTIMA / SBi TM Insole

B



TwinShoe®

C

**OPTIMA PostOp**

Hoher Verbandschuh

Ihr Arzt hat Ihnen einen hohen Verbandschuh verschrieben. Der OPTIMA PostOp Verbandschuh dient ausschließlich der Druckumverteilung und dem Schutz des betroffenen Fußes.

- > Das Produkt soll nur nach ärztlicher Verordnung ausgehändigt werden. Die Anpassung sollte ausschließlich von Fachpersonal erfolgen.
- > Die mehrschichtige Einlegesohle »OPTIMA / SBi Insole 3 x 3« oder die Blockeinlage »OPTIMA / SBi TM Insole« dürfen ausschließlich durch Fachpersonal bearbeitet oder verändert werden.
- > Der OPTIMA PostOp Verbandschuh darf nur in Kombination mit dem OPTIMA Sohlen-system oder einer individuell diabetesadaptierten Fußbettung verwendet werden.
- > Bei unsachgemäßer Handhabung des Produkts sind die Funktion und ein optimaler Schutz nicht mehr gewährleistet.

Anlegen des Verbandshuhs:

1. Zur Vermeidung von Infektionen müssen vor dem Anlegen des OPTIMA PostOp Verbandshuhs immer alle offenen Wunden keimfrei abgedeckt werden.
2. Das Tragen von Verbandstoffen oder Socken wird empfohlen.
3. Achten Sie beim Anlegen des Verbandshuhs darauf, dass die Ferse soweit wie möglich in der Fersenkappe positioniert wird.
4. Beim Schließen der Klettbinden ist darauf zu achten, dass diese ohne Druck und nicht überkreuzt geschlossen werden. Schließen Sie zuerst das Klettband über dem Rist, dann die übrigen Klettbinden wie in Bild 1 nummeriert.

Achtung: Zu fest geschlossene Klettbinden können die Blutzirkulation Ihres Fußes beeinträchtigen!

Empfohlene Zusatzprodukte:

- > OPTIMA / SBi Insole 3 x 3, Modulare Innensohle, (Bild A)
- > OPTIMA / SBi TM Insole, Transmetatarsale Amputationseinlage, (Bild B)
- > DARCO TwinShoe®, Ausgleichsschuh, (Bild C)

Indikationen

- > Plantares diabetisches Ulcus mit vaskulären Komplikationen des Beines (Verwendung in Verbindung mit der OPTIMA / SBi Insole 3 x 3)
- > Führung des kontralateralen Fußes oder Führung des Fußes mit Ulcusrisiko
- > Frakturen der Metatarsalia
- > Postoperative Behandlung nach Zehenamputation
- > Stabilisierung vor einem chirurgischen Eingriff
- > Frakturen der Zehen

Kontraindikationen:

- > keine bekannt

USA / GB Instructions for use**OPTIMA PostOp**

High wound care shoe

Your doctor has prescribed you a high wound care shoe. The OPTIMA PostOp wound care shoe is solely intended to relieve pressure from and protect the affected foot.

- > The product should only be delivered in response to a doctor's prescription. It should only be fitted by specialized staff.
- > The multilayer insole »OPTIMA / SBi Insole 3 x 3« or the block inlay »OPTIMA / SBi TM Insole« may only be adjusted or modified by specialized staff.
- > The OPTIMA PostOp wound care shoe may only be used in conjunction with the OPTIMA sole system or an individual diabetes-compliant foot bed.
- > If the product is improperly treated, its function and optimum protection can no longer be ensured.

Putting on the wound care shoe:

1. To avoid infections, always cover all open wounds aseptically before donning the OPTIMA PostOp wound care shoe.
 2. It is advisable to wear dressings or socks.
 3. When putting on the wound care shoe, ensure that you position the heel as far as it will go into the heel cap.
 4. When you close the hook and loop straps, ensure that you close them without pressure and without crossing them. First close the hook and loop strap over the instep, then the other hook and loop straps as numbered in Fig. 1.
- Caution:** Too tightly fastened hook and loop straps can impair the circulation of blood in your foot!

Recommended supplementary products:

- > OPTIMA / SBi Insole 3 x 3, Modular Insole, (Picture A)
- > OPTIMA / SBi TM Insole, Transmetatarsal amputation insert, (Picture B)
- > DARCO TwinShoe®, Balance shoe, (Picture C)

Indications

- > Diabetic foot ulcer with vein problems on leg (additional use of OPTIMA / SBi Insole 3 x 3)
- > Treatment of lateral foot of the injured foot or treatment of foot with risk of ulcer
- > Metatarsal fracture
- > Rehabilitation after toe amputation
- > Stabilization before surgical intervention
- > Toe fractures

Contraindication:

- > none known