

OPTIMA/SBITM Insole

Distributor
 DARCO (Europe) GmbH
 Gewerbegebiet 18
 82399 Raisting, Germany
 Telefon +49 (0) 88 07. 92 28-0 | Fax -22
 info@darco.de | www.darco.de


 OPTIMA MOLLITER SRL
 Via Breda 19/21
 I-62012 Civitanova Marche (MC)
 Telefon +39 07 33. 80 10-60 | Fax -48
 info@optimamolliter.com
 www.optimamolliter.com

DE Technische Daten

5 Größen:
 S (34 – 36), M (37 – 39), L (40 – 42), XL (43 – 45), XXL (46 – 48)

Rechts und links tragbar.

Wartung:
 Das Produkt ist wartungsfrei.

- Für folgende Hilfsmittel in den entsprechenden Größen erhältlich:**
- > OPTIMA Diab – Unterschenkelfußorthese
 - > OPTIMA PostOP – Hoher Verbandschuh
 - > OPTIMA Europa – Verbandschuh
 - > SBI Frame – Unterschenkel-Fußorthese
 - > SBI W-Heel – Unterschenkel-Fußorthese

Vorsicht

- > Das Tragen von Verbandstoffen oder Socken wird empfohlen.
- > Bei unsachgemäßer Handhabung des Produkts ist die Funktion und ein optimaler Schutz nicht mehr gewährleistet.
- > Dieses Hilfsmittel ist nur für die Anwendung an einem einzelnen Patienten vorgesehen.

USA/GB Technical data

5 Sizes:
 S (34 – 36), M (37 – 39), L (40 – 42), XL (43 – 45), XXL (46 – 48)

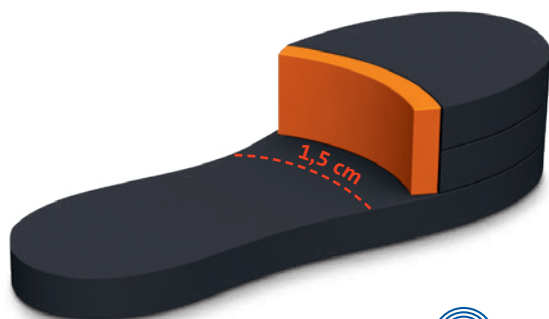
Right and left fit.

Maintenance:
 The product does not require maintenance.

- All required sizes available for the following foot and ankle products:**
- > OPTIMA Diab – Lower leg foot orthosis
 - > OPTIMA PostOP – High Wound Care Shoe
 - > OPTIMA Europa – Wound Care Shoe
 - > SBI Frame – Lower leg foot orthosis
 - > SBI W-Heel – Lower leg foot orthosis

Caution

- > It is recommended to wear bandages or socks.
- > If the product is improperly handled its function and optimal safety can no longer be guaranteed.
- > This aid is intended for single-patient use only.

**OPTIMA / SBi TM Insole**

Transmetatarsale Amputationseinlage

Die OPTIMA / SBi TM Insole dient dem Schutz und der besseren Positionierung des Fußes nach der Amputation im Schuh. Sie besteht aus drei verschiedenen Einzelteilen, die mittels Klebestreifen und Klettband miteinander verbunden werden.

1. Ziehen Sie den Klebestreifen am schwarzen Klettband ab und befestigen Sie dieses an der Innenseite des distalen Sohlenblocks.
2. Befestigen Sie die Klettseite des orangenen Schaumstoff-Polsters an der Klettseite des schwarzen Klettbands.
3. Positionieren Sie den Fußstumpf des Patienten so im Schuh, dass circa 1,5 cm Platz zwischen Stumpf und distalen Sohlenblock ist.

Indikationen

- > zur Behandlung nach Transmetatarsal Amputation

Kontraindikationen:

- > keine bekannt

Reinigungshinweise

Die Sohle kann mit lauwarmem Wasser und Seife oder mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln gereinigt werden.

USA / GB Instructions for use**OPTIMA / SBi TM Insole**

Transmetatarsal amputation insert

The OPTIMA / SBi TM Insole is designed to protect the amputated foot and enhance its positioning in the shoe. It comprises three different parts connected to one another by adhesive strips and hook and loop.

1. Remove the adhesive strip on the black hook and loop strip and attach it to the inner side of the distal sole block.
2. Attach the hook and loop side of the orange foam pad to the hook and loop side of the black tape.
3. Position the stump of the patient's foot in the shoe in such a way that there is about 1.5 cm clearance between the stump and the distal sole block.

Indications

- > for therapy after transmetatarsal amputation

Contraindication:

- > none known

Cleaning instructions

The sole can be cleaned with warm water and soap or regular disinfectants.