

Body Armor® Night Splint – die dorsale Nachtschiene von DARCO



Die Body Armor® Night Splint besteht aus einer rigiden Kunststoffschale und einer Großzehen-schleife zur Dehnung der Faszie. Diese Kombination ermöglicht ein Entgegenwirken der folgenden Indikationen:

- > Verkürzung der plantaren Faszie
- > Fersensporn
- > Achillessehnen-Entzündungen und -Schwächen
- > Metatarsalgie
- > Spitzfußstellungen und Fußgelenkskontrakturen

Hilfsmittelnummer 23.03.01.0009

Die Zehenplatte dorsalisiert alle Zehen und erreicht damit eine stärkere Dehnung der plantaren Faszie. (optional erhältlich)



DARCO



Die Body Armor® Night Splint ist eine Nachtschiene, die den Fuß in 90 Grad zum Unterschenkel hält. Diese Position verhindert eine Spitzfußstellung des Fußes und somit auch eine Verkürzung der Achillessehne.

Die Großzehenschleife hebt den Hallux an und macht sich so den Windlass-Mechanismus* zu Nutze. Dadurch wird zusätzlich eine Dehnung der plantaren Faszie erreicht.

- > der Achillessehne
- > der Tibialis posterior Sehne
- > der tiefen Flexoren und
- > des Muskelapparates des Unterschenkels

Die Body Armor® Night Splint Nachtlagerungsschiene ist auf dem Markt die einzige Orthese, die die natürliche Beugebewegung des Fußes zulässt. Somit wird eine präzise und nachhaltige Streckung der plantaren Faszie erreicht.

* **Windlass-Mechanismus:** Eine Dorsalflexion windet die plantare Faszie um das Metatarsalia I wie bei einer Ankerwinde, dehnt die plantare Faszie und verkürzt die Distanz zwischen Calcaneus und den Metatarsalia und erhöht das longitudinale Fußgewölbe.

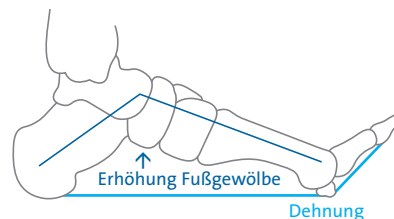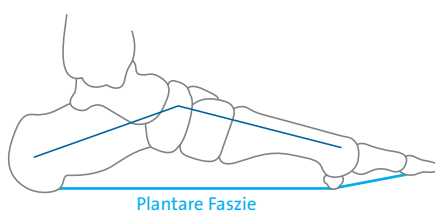

Die verstellbaren Klettbänder garantieren ein schnelles und einfaches Anlegen der Schiene und gewährleisten eine bequeme Passform.

Der Multipositions-Gummiring ermöglicht es dem Anwender, die Zehenschleife in verschiedenen Positionen zu fixieren.

Das niedrige Profil der Schiene verhindert die Spannkraft auf Fußrücken und Tibiakante um bis zu 70%.

Die Body Armor® Night Splint ist universell links wie rechts tragbar und in zwei Größen erhältlich.

GRÖSSE ARTIKELNR.

Body Armor® Night Splint

Farbe: Weiß-Blau

Small	34,0 – 36,0	BADS-S
Standard	37,0 – 47,0	BADS

Toe Plate | Zehenplatte

Universal	BADS-P
-----------	--------

