

# Das original PegAssist™ System von DARCO zur gezielten Druckentlastung.



Neu: Sonderform für OrthoWedge Light

- > zur gezielten Druckentlastung durch entfernbare Pegs
- > stoßhemmende Wirkung
- > erhältlich für die umseitig abgebildeten Schuhmodelle
- > rechts und links tragbar
- > Sonderform für OrthoWedge Light



**DARCO**

Die Pegs werden an den entsprechenden Stellen entfernt, um eine gezielte Druckentlastung zu erhalten. Der Deckkarton fixiert die Entlastungszone.



MedSurg™



HeelWedge®



SlimLine®



OrthoWedge / Light



FXPro® Walker




APB®

Das PegAssist™ Einlagensystem ist für alle abgebildeten Modelle erhältlich.

Die Sohle besteht aus einer 18 mm Kombination aus Plastazote®, Poron® und EVA. Die perfekte Kombination zur Stoßreduzierung und Formbarkeit.

Nachdem die Pegs an der entsprechenden Stelle entfernt wurden, wird der Deckkarton vollständig auf die Sohle geklebt. Er ist mit einer Klebefolie versehen und fixiert so die Pegs um die Entlastungszone und gewährleistet, dass diese nicht verändert wird. Der Deckkarton ist im Lieferumfang enthalten.

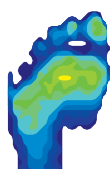

Standard Verbandschuh



OrthoWedge



+ PegAssist™

### MedSurg™

Artikelnr.	Größe	
Damen:		
PAS-W1	Small	34,0 – 36,5
PAS-W2	Medium	37,0 – 38,5
PAS-W3	Large	39,0 – 41,0
Herren:		
PAS-M1	Small	39,0 – 41,0
PAS-M2	Medium	41,5 – 43,0
PAS-M3	Large	43,5 – 45,0
PAS-M4	X-Large	45,5 – 47,0

### OrthoWedge Light (Sonderform)

Artikelnr.	Größe	
PAS-STL0	X-Small	33,5 – 37,0
PAS-STL1	Small	37,5 – 39,5
PAS-STL2	Medium	40,0 – 41,5
PAS-STL3	Large	42,0 – 44,0
PAS-STL4	X-Large	45,5 – 47,0

### Alle weiteren Modelle

PAS-0	X-Small	33,5 – 37,0
PAS-1	Small	37,5 – 39,5
PAS-2	Medium	40,0 – 41,5
PAS-3	Large	42,0 – 44,0
PAS-4	X-Large	45,5 – 47,0

