

Neu bei DARCO

Korrektursocken aus der TASO® Familie | Toe Alignment Sock

Perfekte und unkomplizierte Lösung bei Hallux Valgus (Nach-) Behandlungen

TASO® Function Control
mit Korrekturzügel



TASO® Function Comfort
mit integriertem Zugband



Mit den TASO® Korrektursocken, einer neu gegründeten Produktfamilie bei DARCO, bietet sich eine Versorgungsmöglichkeit bei Hallux Valgus in zwei verschiedenen Versionen: Ideal sowohl als konservative Behandlungsoption als auch im postoperativen Einsatz.

TASO® Function ist die erste Therapie, die den Patienten ganz ohne Aufwand durch den Alltag begleitet. Tapes sind in die Socken integriert und passen sich so ganz individuell an den Fuß an.



DARCO

TASO® Function Control

Vorteile der TASO® Korrektursocken auf einen Blick:

- > Taping Socks arbeiten auf Zug und nicht wie die meisten Hilfsmittel auf Druck.
- > Während der Tragezeit ergibt sich eine konstante Therapie durch den eingearbeiteten bzw. externen Zügel.
- > Die Fehlstellung wird auch während des Gehens korrigiert.
- > In allen Schuhen mit großzügigem Zehenbereich tragbar.
- > Die Socken sind auf links bei 60° waschbar.

Hallux Valgus Zügelkorrektursocke



Individuelles Redressieren durch angebrachten Korrekturzügel




Postoperativ einsetzbar bei einer Hallux Valgus-OP zur Sicherung des Operationsergebnisses oder konservativ einsetzbar.

Das Prinzip ist so effektiv wie einfach: Durch einen medial angebrachten Zügel, der am Großzehbereich der Socke angenäht ist, kann man den Hallux völlig individuell zügeln. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit für den Behandler oder den Patienten selbst, den Hallux postoperativ nach Bedarf zu zügeln. Alternativ ist diese Socke natürlich auch konservativ einsetzbar.

Die TASO® Function Control Zügelkorrektursocke ist für den rechten oder linken Fuß erhältlich. Auf der anderen Seite trägt man jeweils eine mitgelieferte, neutrale Socke ohne Zügel im Tabi-Schnitt (mit separierter Großzehe).

TASO[®] Function Comfort

Hallux Valgus Korrektursocke

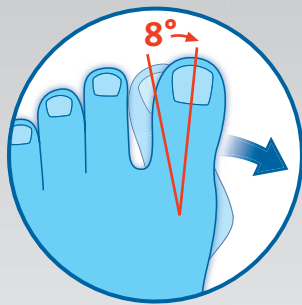

Durchschnittliche Korrektur von 8° des Hallux Valgus-Winkels bei einem flexiblen MTP I (statistisch nachgewiesen)



Konservativ zur Versorgung eines Hallux Valgus mit einem unter Vorspannung aufgebrachten Tape.

Mit dieser Korrektursocke wird durch eine außen angebrachte Tape-Laminierung die Großzehe durch konstanten Zug korrigiert.

Da die Laminierung bei der DARCO Socke außen und nicht wie bei vergleichbaren Produkten innen angebracht ist, kommt es zu keinen Hautirritationen, einem angenehmen Tragegefühl und erleichtert das Anziehen.

Diese Sockenversion wird als Paar angeboten, wobei die Laminierung sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite aufgebracht ist.



Artikelliste TASO®



| GRÖSSE | ART.-NR. | | |
|----------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| TASO® Function | Control rechts | Control links | Comfort |
| 35,0 – 36,0 | TFCL1R | TFCL1L | TFCT1 |
| 37,0 – 38,0 | TFCL2R | TFCL2L | TFCT2 |
| 39,0 – 40,0 | TFCL3R | TFCL3L | TFCT3 |
| 41,0 – 42,0 | TFCL4R | TFCL4L | TFCT4 |
| 43,0 – 44,0 | TFCL5R | TFCL5L | TFCT5 |
| 45,0 – 46,0 | TFCL6R | TFCL6L | TFCT6 |

Farbe: Schwarz

Verpackungseinheit:

- > Control: 1 Paar (1 Socke mit Zügel + 1 Begleitsocke)
- > Comfort: 1 Paar (beide Socken mit integriertem Zugband)

Kompatibel mit YDA

Ein gesunder Auftritt für sensible Füße im aktiven Alltag

Artikelliste YDA



| GRÖSSE | ART.-NR. | | | | |
|--------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Damen | Rot | Grau | Schwarz | Silber | Navy |
| 35 | YDAWR35 | YDAWG35 | YDAWS35 | YDAWV35 | YDAWN35 |
| 36 | YDAWR36 | YDAWG36 | YDAWS36 | YDAWV36 | YDAWN36 |
| 37 | YDAWR37 | YDAWG37 | YDAWS37 | YDAWV37 | YDAWN37 |
| 38 | YDAWR38 | YDAWG38 | YDAWS38 | YDAWV38 | YDAWN38 |
| 39 | YDAWR39 | YDAWG39 | YDAWS39 | YDAWV39 | YDAWN39 |
| 40 | YDAWR40 | YDAWG40 | YDAWS40 | YDAWV40 | YDAWN40 |
| 41 | YDAWR41 | YDAWG41 | YDAWS41 | YDAWV41 | YDAWN41 |



| GRÖSSE | ART.-NR. | | | |
|--------|----------|---------|---------|---------|
| Herren | Blau | Grau | Schwarz | Navy |
| 40 | YDAMB40 | YDAMG40 | YDAMS40 | YDAMN40 |
| 41 | YDAMB41 | YDAMG41 | YDAMS41 | YDAMN41 |
| 42 | YDAMB42 | YDAMG42 | YDAMS42 | YDAMN42 |
| 43 | YDAMB43 | YDAMG43 | YDAMS43 | YDAMN43 |
| 44 | YDAMB44 | YDAMG44 | YDAMS44 | YDAMN44 |
| 45 | YDAMB45 | YDAMG45 | YDAMS45 | YDAMN45 |
| 46 | YDAMB46 | YDAMG46 | YDAMS46 | YDAMN46 |
| 47 | YDAMB47 | YDAMG47 | YDAMS47 | YDAMN47 |

