

AllRound Shoe®

Chaussure fermée pour pansements

La « polyvalente » comme chaussure postopératoire et pour la prise en charge des plaies. Elle offre énormément de place pour les pansements volumineux et séduit par son confort de port élevé.



1. Chaussure à bout fermé dans un matériau respirant sans coutures apparentes, assez large pour faciliter la manipulation.
2. La semelle offre une grande stabilité et une bonne absorption des chocs grâce à deux duretés Shore différentes. La barre de déroulement intégrée permet une démarche physiologiquement correcte.

Code LPPR individuel 7161203



DARCO

AllRound Shoe®

La chaussure parfaite post opératoire et thérapeutique pour les blessures du pied.

Droite = Gauche

R = L

Semelle intérieure amovible



Pour les diabétiques avec semelle intérieure adaptée



Chaussure de compensation non nécessaire



Poids plume




1. Dessus léger et respirant
2. Semelle rigide
3. Semelle EVA grise légère : Forte stabilité (55 shore A)
4. Semelle caoutchouc EVA gris foncé : Antidérapante et amortissante (45 shore A)

INDICATIONS

- > Pour les soins post-opératoires
- > Pour les soins des plaies
- > Arthrite

CARACTÉRISTIQUES

- > Chaussure fermée
 - Repousse l'eau et la saleté
- > Possibilité d'ouverture large
 - Accès facile + espace pour les bandages volumineux
- > Zone de confort sans couture
- > Renforcement rigide + à longue semelle du fond de la chaussure
- > Semelle en mélange de caoutchouc EVA
 - Amortit les chocs + antidérapante
- > Système de fermeture simple et réglable individuellement

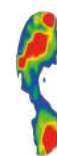

Neutral



AllRound Shoe®

PegContour® Insole

Semelle alvéolée de garniture souple

Droite ≠ Gauche

R ≠ L

Pour les diabétiques



Gain de temps



PegContour® Insole Uni

Semelle alvéolée de garniture souple

Droite = Gauche

R = L

Pour les diabétiques



Gain de temps



INDICATIONS

- > Après une opération de l'hallux valgus et des petits orteils (Austin, Akin, Scarf, Weil, Hohmann, etc.)
- > Modifications du pied d'origine angio-neuropathique associées à de légères déformations du pied
- > Utilisations et prises en charge post-opératoires au niveau du talon
- > Cicatrisation des ulcères au niveau du talon (ulcères de l'arrière-pied)
- > Plaies au niveau du talon
- > Épine calcanéenne / fasciite plantaire
- > Pour une répartition ciblée de la pression en cas de :
 - Lésions plantaires
 - Ulcères plantaires / prévention des ulcères



Domaines d'utilisation supplémentaires pour la semelle noire

- > Pied plat, valgus, étalé



Domaines d'utilisation supplémentaires pour la semelle grise

- > Zones d'hyperpression
- > Lésions au niveau de la voûte plantaire

CARACTÉRISTIQUES

- > Semelle voûte plantaire coussinée (semelle longue) absorbant les chocs avec alvéoles (pegs) amovibles individuellement
 - Ajustement individuel
- > Répartition de la pression plantaire + décharge de pression ponctuelle ciblée
- > Matériau PU abrasif à haute résilience
- > Revêtement de semelle souple en polyester à élasticité longitudinale et transversale
 - Confort de port élevé



Caractéristiques supplémentaires de la semelle noire

- > Contours adaptés à l'anatomie
 - Répartition optimale de la pression
- > Courbure longitudinale médiale et courbure transversale proximale
 - Répartition idéale de la charge



Caractéristiques supplémentaires de la semelle grise

- > Réduction de la pression jusqu'à 45 %
- > Semelle symétrique
 - Peut se porter de façon universelle à droite + à gauche



AllRound Shoe®



AllRound Shoe®
avec PegContour® Insole
(Talon omis)



AllRound Shoe®
avec PegContour® Insole Uni
(Talon omis)

Liste des articles



	TAILLES	RÉF.
AllRound Shoe®		
Couleur : Noir		
XS	37,0 – 38,0	ARS0
S	39,0 – 40,0	ARS1
M	41,0 – 42,0	ARS2
L	43,0 – 44,0	ARS3
XL	45,0 – 46,0	ARS4
XXL	47,0 – 48,0	ARS5




	TAILLES	RÉF.	RÉF.
PegContour® Insole			
Couleur : Noir		Droite	Gauche
XS	37,0 – 38,0	PCI-ARS0-R	PCI-ARS0-L
S	39,0 – 40,0	PCI-ARS1-R	PCI-ARS1-L
M	41,0 – 42,0	PCI-ARS2-R	PCI-ARS2-L
L	43,0 – 44,0	PCI-ARS3-R	PCI-ARS3-L
XL	45,0 – 46,0	PCI-ARS4-R	PCI-ARS4-L
XXL	47,0 – 48,0	PCI-ARS5-R	PCI-ARS5-L



	TAILLES	RÉF.
PegContour® Insole Uni		
Couleur : Grise		
XS	37,0 – 38,0	PCIU-ARS0
S	39,0 – 40,0	PCIU-ARS1
M	41,0 – 42,0	PCIU-ARS2
L	43,0 – 44,0	PCIU-ARS3
XL	45,0 – 46,0	PCIU-ARS4
XXL	47,0 – 48,0	PCIU-ARS5

Tailles et pointures

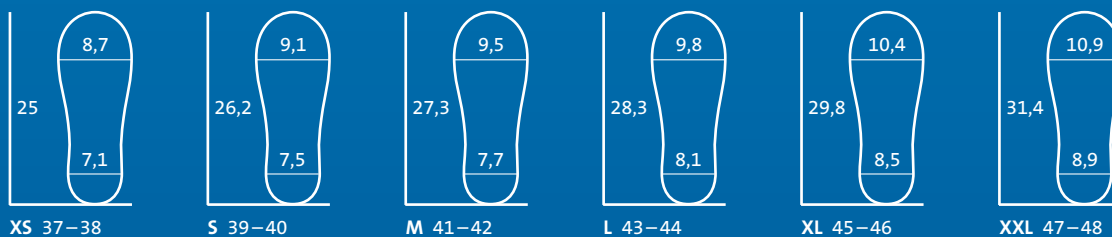

Toutes les mesures sont définies en cm et correspondent à la semelle intérieure. Les tailles de chaussures DARCO ne représentent qu'une référence générale. Le choix de la pointure est fortement influencé par le volume des bandages et la taille du plâtre.