

# Body Armor® Night Splint – Attelle de nuit dorsale

La combinaison d'un étirement soutenu de l'aponévrose plantaire avec la bride pour orteils et le maintien de la position grâce à l'attelle, permet de contrecarrer les indications suivantes :

- > Raccourcissement de l'aponévrose plantaire
- > Tendinite et tendinose achilléenne
- > Métatarsalgie
- > Pied équin et contracture de la cheville



**Incluse : Toe Plate | Plaque pour orteil**  
La plaque orteil dorsalise tous les orteils et procure ainsi un meilleur soulagement du fascia plantaire



**DARCO**

La Body Armor® Night Splint est une attelle stabilisant la position du pied et de la partie inférieure de la jambe, à un angle de 90° afin d'éviter la déformation du pied équin, et par conséquent, de prévenir le raccourcissement du tendon d'Achille.



Les sangles réglables sont rapides et faciles à utiliser, et permettent un ajustement parfait.



L'anneau élastique permet à l'utilisateur de fixer la bride pour orteils dans différentes positions.



Le profil bas de l'attelle réduit jusqu'à 70 % la tension sur le dos du pied et sur la crête antérieure du tibia.

## Indications

- > Raccourcissement du fascia plantaire
- > Épine calcanéenne (fasciite plantaire)
- > Inflammations et faiblesse du tendon d'Achille
- > Métatarsalgie
- > Pied d'équin et contractures de l'articulation du pied

## Avantages et bénéfices


La bride pour orteils élève l'hallux et engage ainsi activement le mécanisme de treuil\* du pied, ce qui entraîne un étirement soutenu de l'aponévrose plantaire.


De plus, la bride pour orteils exerce une légère tension sur :

- > Le tendon d'Achille
- > Le tendon du tibia postérieur
- > Les tendons fléchisseurs profonds du pied
- > Le système musculaire de la jambe inférieure

La Body Armor® Night Splint est le seul système d'attelle actuellement disponible sur le marché qui sollicite activement le mécanisme de treuil du pied, ce qui permet d'obtenir un étirement efficace et durable du fascia plantaire.

\* mécanisme de treuil : une dorsiflexion enroule l'aponévrose plantaire autour des métatarses – ce qui peut être comparé à un treuil. Elle étire alors l'aponévrose plantaire et raccourcit la distance entre le calcaneum et les métatarses, et élève ainsi l'arc longitudinal.

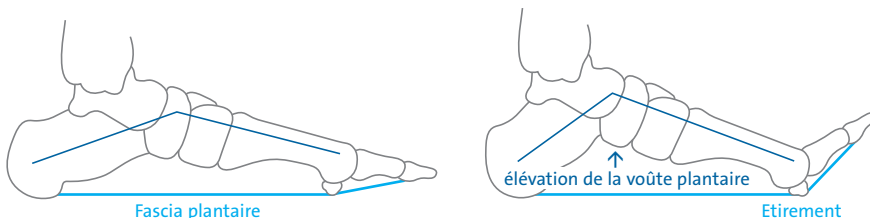

	TAILLES	RÉF.	
	<b>Couleur : Blanc-Bleu</b>		
	Small	34,0 – 36,0	BADS-S
	Standard	37,0 – 47,0	BADS

L'attelle Body Armor® Night Splint s'adapte au pied gauche ou droit, offrant ainsi un design unique.



**Body Armor® Sleeve**  
(Produit connexes)

