

# Body Armor® Pro Term

## Fußstumpforthese

Interimsversorgung nach Chopart- und Lisfranc-Amputationen

Tarfinummer 34374 023

R = L Rechts = Links

Für Diabetiker

Zeitersparnis



90°  
Stellung



Perfekte Passform durch  
einfaches Aufpumpen  
und Ablassen der Luft



**DARCO**

# Die schnelle Lösung zur Mobilisierung bei Vorfußamputation

Bei der Body Armor® Pro Term Fußstumpforthese können Stumpfschwankungen in der Interimsphase mithilfe des Soft-Linings mit integrierter Pumpe schnell ausgeglichen werden. Die Fußstumpforthese ermöglicht so eine individuelle Anpassung an die Gegebenheiten des Fußstumpfes. Der knöchelübergreifende Schaft in 90° Stellung stabilisiert das obere sowie untere Sprunggelenk. Die ventrale Stützlasche und das variable wie auch sichere Verschluss-System ermöglichen eine zirkuläre, flächige Kompression. Die keilförmige Lauf- und Innensohle in Dorsalextension gewährleistet zudem eine optimale Rückfußbelastung.



Weite Öffnung für leichtes Einsteigen



Praktisches Verschluss-System



Keilförmiges Sohlensystem für eine optimale Rückfußbelastung

## EIGENSCHAFTEN


- > Interimsversorgung nach Vorfußamputation
- > Keilförmige Lauf- und Innensohle in Dorsalextension
  - Rückfußbelastung
- > Schalenkonstruktion: Fuß zu Unterschenkel in 90° Stellung
- > Weite Öffnung
  - Leichtes Einsteigen
- > Lining mit integrierter Pumpe
  - Individuelle Anpassung an Stumpfgegebenheiten
- > Ventrale Stützlasche
  - Zirkuläre flächige Kompression
- > Sicheres Verschluss-System
- > Universell rechts und links tragbar
- > Farbe: Schwarz-Blau

## INDIKATIONEN

- > Postoperative Versorgung nach Chopart- / Lisfranc-Amputationen
- > Diabetisches Fußsyndrom
- > PAVK (periphere arterielle Verschlusskrankheit)
- > Traumata

## GRÖSSEN UND MASSE

ARTIKELNR.	GRÖSSE	STUMPF-LÄNGE
BAPT2	M	16 cm
BAPT3	L	19 cm

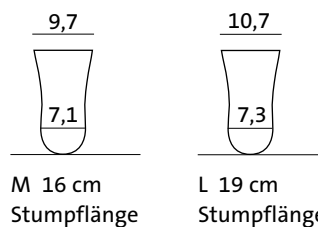

## KOMBIPRODUKTE



Protective Sock  
Unterziehstrumpf



WCS®  
Verband- und Wundtherapieschuh