

Body Armor[®] Pro Term

Orthèse pour moignon de pied

Nouvelle
version



Maintenant



25 %
plus léger*



NOUVEAU

PowerPods[®]
Technologie



La solution
parfaite en cas
d'amputation
de l'avant-pied.

Traitement provisoire après amputations.

L'orthèse pour moignon de pied Body Armor® Pro Term s'adapte en toute flexibilité aux variations du moignon pendant la phase provisoire grâce à une doublure intérieure douce avec pompe intégrée. La tige inter-malléolaire à 90° stabilise l'articulation de la cheville supérieure et inférieure, tandis que la languette de soutien ventrale et le système de fermeture variable permettent une compression uniforme.



NOUVEAU Système de fermeture avec roulettes de renvoi

Fermeture plus facile grâce à une meilleure transmission des forces

Caractéristiques

Stabilité et protection

- Construction de la coque en position 90°
 - Stabilisation de la cheville
- Système de fermeture sûr
 - Bonne stabilité et guidage sûr du moignon
- Fabrication haute et large surface d'appui
 - Stabilité accrue et appui sûr

Biomécanique et décharge

- Semelle intérieure sandwich à lit souple
 - Répartition de la pression pour la prévention des escarres
- Structure orthograde
 - Posture naturelle et biomécanique optimisée

Adaptation individuelle et confort

- 25 % plus léger (env. 220 g) que le modèle précédent
 - Charge réduite
- Longueur de la base élargie (+3 cm)
 - Davantage de flexibilité dans la prise en charge
- Semelle extérieure PowerPods®
 - Adaptation aux besoins individuels
- Languette de soutien ventrale flexible
 - Assise ergonomique, répartition uniforme de la pression
- Roulettes de renvoi
 - Fermeture des sangles facilitée

Avantages pratiques

- Fenêtre d'observation et d'aération
 - Meilleure aération, contrôle du moignon
- Ouverture large
 - Facilité d'enfilage
- Peut se porter de façon universelle à droite et à gauche
- Couleur : Gris-Bleu

Indications

- En postopératoire pour les amputations d'une partie du pied (p. ex. amputations Chopart ou Lisfranc) pour cause de
- Syndrome du pied diabétique
 - AOP (artériopathie oblitérante périphérique)
 - Traumatisme



Large ouverture pour faciliter le chaussage




Ajustement optimal par régulation de l'air

Tailles + Dimensions

Ajustement optimisé : Veuillez prendre en compte les mesures actualisées.

Taille	Longueur Moignon	Semelle intérieure en cm			Réf.
		B	C	E	
M	19,5 cm	13,0	9,5	20,0	BAPT2
L	21,0 cm	14,0	10,5	22,0	BAPT3
Nouveau XL	22,5 cm	14,5	11,5	23,6	BAPT4

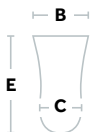

Les dimensions et les tailles sont des valeurs indicatives et dépendent du volume du pansement.

Produit compatible

WCS®

Chaussure pour le soin des plaies



Droite = Gauche



Pour les diabétiques



Poids plume



Gain de temps



DARCO (Europe) GmbH

Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany | Tel. +49 8807 9228-0 | info@darco.de | www.darco.de

