

Movilo®

Chaussure de confort thérapeutique



3 nouvelles couleurs



Pour que marcher
redevienne un plaisir.

Movilo® Fly

Berry



Black



Blue



Sand



Sky



Movilo® Street

Black



White



Olive



Pearl



Conçu pour plus de **confort.**

La chaussure de confort thérapeutique DARCO aide les personnes qui ont des problèmes de pieds ou qui sont souvent debout à retrouver un mouvement actif, sain et sans douleur dans la vie de tous les jours et pendant les loisirs. La chaussure confort Movilo® est disponible en deux modèles : Fly et Street. Les deux sont basés sur la même forme et il n'y a que quelques petites différences entre les deux modèles. Nous proposons aux personnes souffrant de problèmes de pieds des chaussures modernes et confortables, fondées sur une expertise médicale et thérapeutique, qui facilitent la vie et la marche.

Caractéristiques



Semelle extérieure

- Barre de déroulement décalée vers l'arrière
 - Décharge de l'avant-pied
- Revêtement en caoutchouc résistant à l'abrasion sur une grande surface (3 mm)
 - Antidérapante
- Construction de la semelle amortissant les chocs et absorbant les forces
- Renfort semi-rigide continu du fond de la chaussure
 - Décharge de l'avant-pied
- Surface d'appui longue et sûre
- Faible rebond (11 mm)



Système de semelle intérieure

- Semelle orthopédique en 2 parties avec une hauteur totale de 8 mm
 - Semelle intérieure anatomique (6 mm)
 - Guidage modéré du talon
 - Léger soutien de la voûte longitudinale et transversale
 - Semelle PU recouverte de micro-fibres lisses pour un bon amorti + facilité d'enfilage
 - Semelle de réserve (2 mm)
 - Pour la compensation du volume
 - Amortissement supplémentaire
- Interchangeable
- Espace suffisant (8 mm) pour des semelles personnalisées
- Utilisable individuellement



Forme de chaussure Movilo®

- Conception de la forme adaptée au pied
- Largeur idéale de la plante du pied
- Hauteur de la zone des orteils 21,5 – 27 mm (selon taille)
- Développé en coopération avec Wiest GmbH



Laçage

- Lacets élastiques avec fermeture rapide
 - Facile à mettre et à enlever
- Lacets plats non élastiques (fournis)
 - Meilleur maintien
- Trou pour lacets supplémentaire
 - Ajustement plus ferme



Tige

- Respirante
- Pointe du pied renforcée
- Découpe anatomique de la cheville
 - Ajustement idéal de l'arrière-pied
- Contrefort ajusté de manière optimale
 - Bon maintien et soutien sûr du talon
- Boucle au niveau du talon
 - Facilité d'enfilage

Modèle Fly

- Boucle au niveau de la languette de la chaussure
 - Facilité d'enfilage
- Sans doublure intérieure
 - Minceur
 - Souplesse
 - Perméabilité à l'air


Modèle Street

- Tige indéformable
- Doublure intérieure souple
 - Bon rembourrage
 - Protection contre la pression et les influences extérieures
 - Confort de port élevé

Indications

Pour le traitement des problèmes au niveau des pieds en cas de :

- Déformations légères du pied / des orteils comme p. ex. hallux valgus, orteils en marteau et en griffe
- Hallux rigidus
- Métatarsalgie
- Névrome de Morton
- Polyarthrite rhumatoïde
- Polyarthrite, arthrose, goutte
- Fasciite plantaire / Épine calcanéenne
- Formation de cals, prévention des panaris
- Diabète sans PNP / AOP (groupe de risque 0 selon l'Association allemande du diabète)
- Diabète sans PNP / AOP avec déformation du pied (groupe de risque 1 selon l'Association allemande du diabète)
- Diabète avec perte de sensibilité due à une PNP / AOP pertinente (groupe de risque 2a selon l'Association allemande du diabète)

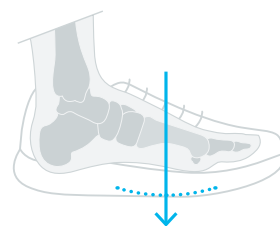

Rouleau métatarsien reculé





Semelle intérieure amovible



Pour les diabétiques



Poids plume

Liste d'articles + tailles et dimensions

Movilo® Fly

Pointure	Semelle intérieure		Longueur du pied	Largeur du pied	Hauteur de la zone des orteils	Réf.				
	A	B				F	G	H	Berry ¹	Black ¹
36	24,0	9,0	22,5 - 23,1	22,6	2,15	MOFBYP36	MOFBAP36	MOFBUP36	MOFSDP36	MOFSKP36
37	24,6	9,1	23,1 - 23,7	23,0	2,20	MOFBYP37	MOFBAP37	MOFBUP37	MOFSDP37	MOFSKP37
38	25,3	9,2	23,8 - 24,4	23,4	2,25	MOFBYP38	MOFBAP38	MOFBUP38	MOFSDP38	MOFSKP38
39	26,0	9,3	24,5 - 25,1	23,8	2,30	MOFBYP39	MOFBAP39	MOFBUP39	MOFSDP39	MOFSKP39
40	26,6	9,4	25,1 - 25,7	24,2	2,35	MOFBYP40	MOFBAP40	MOFBUP40	MOFSDP40	MOFSKP40
41	27,3	9,6	25,8 - 26,4	24,6	2,40	MOFBYP41	MOFBAP41	MOFBUP41	MOFSDP41	MOFSKP41
42	28,0	9,8	26,5 - 27,1	25,0	2,45	MOFBYP42	MOFBAP42	MOFBUP42	MOFSDP42	MOFSKP42
43	28,6	10,1	27,1 - 27,7	25,4	2,50	MOFBYP43	MOFBAP43	MOFBUP43	MOFSDP43	MOFSKP43
44	29,3	10,2	27,8 - 28,4	25,8	2,55	-	MOFBAP44	MOFBUP44	MOFSDP44	MOFSKP44
45	30,0	10,3	28,5 - 29,1	26,2	2,60	-	MOFBAP45	MOFBUP45	MOFSDP45	MOFSKP45
46	30,6	10,4	29,1 - 29,7	26,6	2,65	-	MOFBAP46	MOFBUP46	MOFSDP46	MOFSKP46
47	31,3	10,5	29,8 - 30,4	27,0	2,70	-	MOFBAP47	MOFBUP47	MOFSDP47	MOFSKP47

Movilo® Street

Pointure	Semelle intérieure		Longueur du pied	Largeur du pied	Hauteur de la zone des orteils	Réf.			
	A	B				F	G	H	Black ¹
36	24,0	9,0	22,5 - 23,1	22,6	2,15	MOSBAP36	MOSWIP36	MOSOVP36	MOSPLP36
37	24,6	9,1	23,1 - 23,7	23,0	2,20	MOSBAP37	MOSWIP37	MOSOVP37	MOSPLP37
38	25,3	9,2	23,8 - 24,4	23,4	2,25	MOSBAP38	MOSWIP38	MOSOVP38	MOSPLP38
39	26,0	9,3	24,5 - 25,1	23,8	2,30	MOSBAP39	MOSWIP39	MOSOVP39	MOSPLP39
40	26,6	9,4	25,1 - 25,7	24,2	2,35	MOSBAP40	MOSWIP40	MOSOVP40	MOSPLP40
41	27,3	9,6	25,8 - 26,4	24,6	2,40	MOSBAP41	MOSWIP41	MOSOVP41	MOSPLP41
42	28,0	9,8	26,5 - 27,1	25,0	2,45	MOSBAP42	MOSWIP42	MOSOVP42	MOSPLP42
43	28,6	10,1	27,1 - 27,7	25,4	2,50	MOSBAP43	MOSWIP43	MOSOVP43	MOSPLP43
44	29,3	10,2	27,8 - 28,4	25,8	2,55	MOSBAP44	MOSWIP44	MOSOVP44	MOSPLP44
45	30,0	10,3	28,5 - 29,1	26,2	2,60	MOSBAP45	MOSWIP45	MOSOVP45	MOSPLP45
46	30,6	10,4	29,1 - 29,7	26,6	2,65	MOSBAP46	MOSWIP46	MOSOVP46	MOSPLP46
47	31,3	10,5	29,8 - 30,4	27,0	2,70	MOSBAP47	MOSWIP47	MOSOVP47	MOSPLP47

¹ Never Out of Stock (NOS) : Disponible en permanence

² Limited Edition (LE) : Disponible pour une durée limitée

Trouvez la taille qui vous convient



Toutes les mesures sont indiquées en centimètres et correspondent à la longueur de la semelle intérieure. Les pointures indiquées sont données à titre indicatif. Le choix de la taille dépend principalement du volume du pansement ou du bandage utilisé.



DARCO (Europe) GmbH

Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany | Tel. +49 8807 9228-0 | info@darco.de | www.darco.de

