


Relief Dual® Relief Dual® Plus

Fußteilentlastungsschuhe

Hilfsmittelnummer 31.03.03.5072



Weg vom
Vorfuß-Plateau!

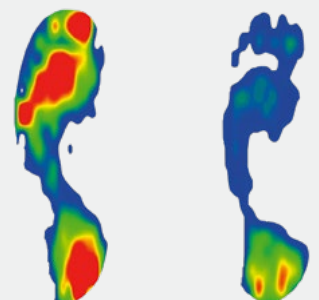

Neutrale Messung Relief Dual® / Plus

Stabilisierung und Entlastung ohne Vorfuß-Plateau!



Die Vorteile

Zwei-Sohlentechnologie

- EVA-Zwischensohle + Gummilaufsohle
 - Hohe Stoßdämpfung im Fersen- und Ballenbereich
 - Sicheres, rutschfestes Abrollen

Gezielte Entlastung nach OP und bei Diabetes


- Rigide Brandsohle
 - Reduziert Gelenkbewegungen
- Rückverlagerte Ballenrolle
 - Entlastet den Vorfuß
- Negativabsatz bei Nutzung von DARCO Innensohlen
- Auch für diabetesadaptierte Fußbettung geeignet

Einfach anzupassen – bequem im Alltag

- Breiter Ristklettverschluss
 - Kürzbar, selbstschließend, doppelt umgelenkt
- Nahtfreier Vorfuß, luftiges Obermaterial
- Herausnehmbare Innensohle, weiter Einstieg

Durchdachtes Design für mehr Schutz

- Square Toe
 - Schützt die Zehen
- Geringe Profilhöhe
 - Kein Höhenausgleich nötig

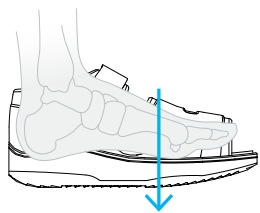

Rückverlagerte Ballenrolle

Innensohle austauschbar mit

- Puzzle Insole®
- Relief Contour Insole
- PegAssist® Insole
- PegContour® Insole Uni



Schuhboden-
versteifung
→ **Optimiertes
Abrollverhalten**

Die Unterschiede

Relief Dual® Plus
Schaft
64%
höher
als bei Relief Dual®



Relief Dual® Plus
Sprunggelenksum-
schließender Verschluss



Relief Dual®
Stabile Fersenkappe
für besseren Rückfußhalt



Relief Dual® Plus
Individuell einstellbare
Fersenkappe



Relief Dual®
Weiter Einstieg



Relief Dual® Plus
Maximale Öffnungsmöglichkeit

Relief Dual®

Fußteilentlastungsschuh

Hilfsmittelnummer 31.03.03.5072

Rechts = Links



Austauschbare
Innensohle



Für Diabetiker mit
geeigneter Innensohle



Ausgleichsschuh
nicht notwendig



Geringes Gewicht



Stabile
Fersenkappe



Schuhboden
versteift



Rückverlagerte
Ballenrolle



Eigenschaften

- Innovative Zwei-Sohlentechnologie
→ Abriebfest, stoßdämpfend, rutschhemmend, mit durchgehend rigider Schuhbodenversteifung
- Verringerte Fußgelenkbewegungen + bessere Druckumverteilung nach Operationen
- Negativabsatz durch Verwenden der Innensohlen Puzzle Insole®, Relief Contour Insole

- Für diabetesadaptierte Fußbettung geeignet
- Breiter Klettgurt mit medialer + lateraler Umlenkschleife
- Rückverlagerte Ballenrolle
→ Weniger Belastung im Vorfuß
- Square Toe: Großzügige, eckige Form
→ Schutz der Zehen

Indikationen

- Postoperativ zur Stabilisierung und Entlastung z. B. bei Fußosteotomien

Relief Dual® Plus

Fußteilentlastungsschuh mit hohem Schaft

Hilfsmittelnummer 31.03.03.5072

Rechts = Links 

Austauschbare
Innensohle 

Für Diabetiker mit
geeigneter Innensohle 

Ausgleichsschuh
nicht notwendig 

64%
höher als der
Relief Dual®



Schuhboden
versteift



Rückverlagerte
Ballenrolle

Eigenschaften

- Hoher Schaft: 64 % höher als bei Relief Dual®
 - Orthograder Rückfußhalt
- Individuell einstellbare Fersenkappe
 - Optimaler Halt + maximale Stabilität
- Sprunggelenksumschließender Verschluss
 - Zusätzlicher Halt
- Maximale Öffnungsmöglichkeit
 - Platz für voluminöse Verbände
- Reduzierte Dorsalextensionsmomente
 - Hohe Vorfußentlastung
- Rückverlagerte Ballenrolle
 - Weniger Belastung im Vorfuß

- Innovative Zwei-Sohlentechnologie
 - Abriebfest, stoßdämpfend, rutschhemmend, mit durchgehend rigider Schuhbodenversteifung
- Verringerte Fußgelenksbewegungen + bessere Druckumverteilung nach Operationen
- Negativabsatz durch Verwenden der Innensohlen Puzzle Insole®, Relief Contour Insole
- Für diabetesadaptierte Fußbettung geeignet
- Breiter Klettgurt mit medialer + lateraler Umlenkschlaufe
- Square Toe: Großzügige, eckige Form
 - Schutz der Zehen

Indikationen

- Postoperativ:
 - Zur Stabilisierung und Entlastung z. B. bei Fußosteotomien
 - Bei Haglundexostosen-Abtragungen
 - Bei Fasciitis Plantaris / Fersensporn
- Zur Wundtherapie

Druckentlastende und flexible Innensohlen-Systeme

Details zu den Innensohlen im separaten Flyer.

PegAssist® Insole

Waben-Einlegesohle

Abrechnungsvorschlag
bei Verbandshuhen 31.99.99.0999
(Sonderarbeiten nach KVA)



Indikationen

Zur gezielten Druckumverteilung bei:

- Plantaren Läsionen
- Plantaren Ulzerationen
- Hyperpressionsstellen



Puzzle Insole®

Modulare Innensohle

Abrechnungsvorschlag
bei Verbandshuhen 31.99.99.0999
(Sonderarbeiten nach KVA)

Indikationen

Kleinzehenmodul (schmal)

- Schneiderballen (Digitus Superductus)
- Jones-Frakturen (Puzzle-Modul reicht bis Lisfranc Gelenkreihe)

Großzehenmodul (breit)

- MPG- und GZGG-Arthrodesen
- Austin-, Scarf- und Akin-Osteotomien
- Closing- und Opening-Wedge
- Quer- und Pendel-Osteotomien
- Lapidus-Arthrodesen (TMT1-Arthrodesen)
- Youngswick-Osteotomien (Puzzle-Modul reicht bis Cuneiforme I)

Mittelmodul

- Weil- und / oder Helal-Osteotomien I – IV
- Morton Neurom
- Hammerzahn-Korrekturen
- PIP- / DIP-Arthrodesen
- Os Metatarsale Frakturen II – IV
- Verkürzungs-Osteotomien der Os Metatarsalia II – IV (Puzzle-Modul reicht bis proximales Ende der Metatarsalia II – IV)



PegContour® Insole Uni

Universelle Waben-Weichbettungseinlegesohle

Abrechnungsvorschlag
Verbandshuhen 31.99.99.0999
(Sonderarbeiten nach KVA)



Indikationen


- Nach Hallux Valgus- und Kleinzehen-Operationen (Austin, Akin, Scarf, Weil, Hohmann etc.)
 - Postoperative Anwendungen und Versorgungen an der Ferse
 - Angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit milden Fußdeformitäten
 - Abheilung von Ulzerationen im Fersenbereich (Rückfußulcera)
 - Fersenwunden
 - Fasciitis Plantaris / Fersensporn
- Zur gezielten Druckumverteilung bei:**
- Plantaren Läsionen
 - Plantaren Ulzerationen
 - Hyperpressionsstellen



Relief Contour Insole

Weichbettungseinlegesohle

Abrechnungsvorschlag
bei Verbandshuhen 31.99.99.0999
(Sonderarbeiten nach KVA)

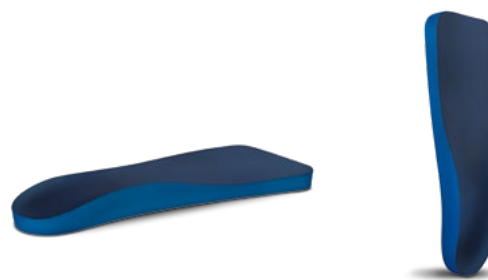

Indikationen

- Nach Hallux Valgus- und Kleinzehen-Operationen (Austin, Akin, Scarf, Weil, Hohmann etc.)
- Knick-, Senk-, Spreizfuß
- Angio-neuropathische Fußveränderungen in Kombination mit milden Fußdeformitäten






Clever kombiniert für optimale Ergebnisse.

Größen + Maße

Größe	Schuhgröße	Innensohle			Relief Dual®		Relief Dual® Plus	
		A	B	C	Art.-Nr.	PZN	Art.-Nr.	PZN
Damen								
WS	34,0 – 36,5	23,6	9,0	5,5	RD-W1	16629852	RDP-W1	16907481
WM	37,0 – 38,5	24,6	9,5	6,0	RD-W2	16629869	RDP-W2	16907475
WL	39,0 – 41,0	26,0	10,0	6,0	RD-W3	16629881	RDP-W3	16907469
Herren								
MS	39,0 – 41,0	26,0	10,5	6,5	RD-M1	16629800	RDP-M1	16907446
MM	41,5 – 43,0	27,5	11,0	6,5	RD-M2	16629817	RDP-M2	16907417
ML	43,5 – 45,0	29,0	11,5	7,0	RD-M3	16629823	RDP-M3	16907400
MXL	45,5 – 47,0	31,0	12,5	7,5	RD-M4	16629846	RDP-M4	16907452
MXXL	47,5 – 50,0	33,0	13,5	8,5	-	-	RDP-M5	18090191

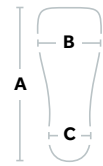

Alle Maße sind in cm angegeben und entsprechen der Größe der Innensohle. Die angegebenen Schuhgrößen sind Richtwerte. Die Wahl der Schuhgröße richtet sich maßgeblich nach dem Volumen der jeweiligen Verbandsversorgung.

Kombiprodukte

Größe	Schuhgröße	Toe Cap (optional)		Relief Contour Insole		PegContour® Insole Uni	PegAssist® Insole	Puzzle Insole®
		Art.-Nr.	PZN	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Damen								
WS	34,0 - 36,5	TCDW1	16631180	RC-W1-R	RC-W1-L	PCIU-W1	PAS-W1	PI-WS
WM	37,0 - 38,5	TCDW2	16631197	RC-W2-R	RC-W2-L	PCIU-W2	PAS-W2	PI-WM
WL	39,0 - 41,0	TCDW3	16631211	RC-W3-R	RC-W3-L	PCIU-W3	PAS-W3	PI-WL
Herren								
MS	39,0 - 41,0	TCDM1	16631122	RC-M1-R	RC-M1-L	PCIU-M1	PAS-M1	PI-MS
MM	41,5 - 43,0	TCDM2	16631139	RC-M2-R	RC-M2-L	PCIU-M2	PAS-M2	PI-MM
ML	43,5 - 45,0	TCDM3	16631145	RC-M3-R	RC-M3-L	PCIU-M3	PAS-M3	PI-ML
MXL	45,5 - 47,0	TCDM4	16631174	RC-M4-R	RC-M4-L	PCIU-M4	PAS-M4	PI-MXL
MXXL	47,5 - 50,0	TCDM5	19147266	-	-	PCIU-M5	-	-

Druck messen.
Gezielt entlasten.



Relief Dual® / Plus



+ Relief Contour Insole



+ PegContour® Insole Uni
Ausparung Vorfuß
MTP II + III



+ PegAssist® Insole
Ausparung Vorfuß
MTP II + III



+ Puzzle Insole®
Austausch
Großzehenmodul

HiMi-Nr. darf auf das Rezept | Budgetneutrale Verordnung



DARCO (Europe) GmbH

Gewerbegebiet 18 | 82399 Raisting | Germany | Tel. +49 8807 9228-0 | info@darco.de | www.darco.de

