

Ubiq[®]

Chaussure de confort thérapeutique

NOUVEAU



Ubiq[®] Way



**Le héros
du quotidien.
Style inclus.**





Plus de légèreté à chaque pas.

La chaussure thérapeutique confortable Ubiq® est conçue pour les personnes qui accordent de l'importance à une marche confortable et dynamique. Le mouvement naturel et fluide du roulement du pied permet une sensation de marche agréable au quotidien. Fonctionnelle, élégante et si polyvalente qu'elle s'adapte à toutes les situations, que ce soit au travail, pendant les loisirs ou à la maison.

Le nom Ubiq® est dérivé du terme « omniprésent » et signifie « présent partout ». C'est exactement ce que cette chaussure incarne : acceptation universelle, flexibilité et polyvalence. Une véritable chaussure polyvalente qui s'adapte à toutes les situations et s'harmonise avec tous les styles.

dynamique
amortissant
antidérapant



Indications

- Déformations légères du pied et des orteils comme p. ex. hallux valgus, orteils en marteau et en griffe
- Hallux limitus
- Diabète sans PNP / AOP (groupe de risque 0 selon l'Association allemande du diabète)
- Diabète sans PNP / AOP, mais avec déformation du pied (groupe de risque 1 selon l'Association allemande du diabète)

Caractéristiques



Semelle extérieure

- Barre de déroulement décalée vers l'arrière
 - Décharge de l'avant-pied
- Revêtement en caoutchouc résistant à l'abrasion sur une grande surface (4 mm)
 - Antidérapante
- Construction de la semelle amortissant les chocs et absorbant les forces
- Renfort semi-rigide continu du fond de la chaussure
 - Décharge de l'avant-pied
- Surface d'appui réduite
 - Déroulement dynamique et rapide
- Faible rebond (7 mm)
 - Position naturelle du pied



Semelle intérieure

- Semelle intérieure anatomique (6 mm)
 - Guidage modéré du talon
 - Léger soutien de la voûte longitudinale et transversale
 - Semelle PU recouverte de micro-fibres lisses pour un bon amorti + facilité d'enfilage
- Interchangeable
- Espace suffisant (6 mm) pour des semelles personnalisées



Forme de chaussure Ubiq®

- Conception de la forme adaptée au pied
- Largeur idéale de la plante du pied
- Forme galbée
- Hauteur de la zone des orteils 23,3 – 27,6 mm (selon taille)



Laçage

- Lacets élastiques avec fermeture rapide
 - Facile à mettre et à enlever
- Lacets plats non élastiques (fournis)
 - Meilleur maintien



Tige

- Respirante
- Pointe du pied renforcée
- Découpe anatomique de la cheville
 - Ajustement idéal de l'arrière-pied
- Contrefort ajusté de manière optimale
 - Maintien bon et sûr du talon
- Boucle au niveau du talon
 - Facilité d'enfilage
- Tige indéformable
- Doublure intérieure souple
 - Bon rembourrage
 - Protection contre la pression et les influences extérieures
 - Confort de port élevé

Black




Grey



Navy



Lemon

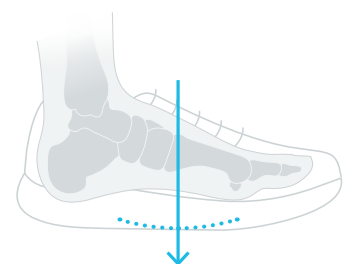


Rouleau métatarsien reculé et dynamique



Liste d'articles + tailles et dimensions

Ubiq® Way

Pointure	Semelle intérieure		Longueur du pied	Largeur du pied	Hauteur de la zone des orteils	Réf.			
	A	B				F	G	H	Black
36	24,0	9,0	22,5 – 23,1	22,5	2,33	UBWBA36	UBWGY36	UBWNY36	UBWLM36
37	24,6	9,1	23,1 – 23,7	23,0	2,37	UBWBA37	UBWGY37	UBWNY37	UBWLM37
38	25,3	9,2	23,8 – 24,4	23,4	2,41	UBWBA38	UBWGY38	UBWNY38	UBWLM38
39	26,0	9,3	24,5 – 25,1	23,8	2,45	UBWBA39	UBWGY39	UBWNY39	UBWLM39
40	26,6	9,4	25,1 – 25,7	24,3	2,49	UBWBA40	UBWGY40	UBWNY40	UBWLM40
41	27,3	9,6	25,8 – 26,4	24,7	2,52	UBWBA41	UBWGY41	UBWNY41	UBWLM41
42	28,0	9,8	26,5 – 27,1	25,2	2,56	UBWBA42	UBWGY42	UBWNY42	UBWLM42
43	28,6	10,1	27,1 – 27,7	25,6	2,60	UBWBA43	UBWGY43	UBWNY43	UBWLM43
44	29,3	10,2	27,8 – 28,4	26,1	2,64	UBWBA44	UBWGY44	UBWNY44	UBWLM44
45	30,0	10,3	28,5 – 29,1	26,5	2,68	UBWBA45	UBWGY45	UBWNY45	UBWLM45
46	30,6	10,4	29,1 – 29,7	27,0	2,72	UBWBA46	UBWGY46	UBWNY46	UBWLM46
47	31,3	10,5	29,8 – 30,4	27,4	2,76	UBWBA47	UBWGY47	UBWNY47	UBWLM47

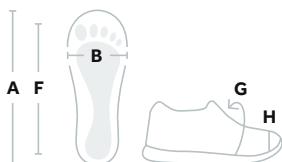

Toutes les mesures sont indiquées en centimètres et correspondent à la longueur de la semelle intérieure. Les pointures indiquées sont données à titre indicatif. Le choix de la taille dépend principalement du volume du pansement ou du bandage utilisé.



Trouvez la taille qui vous convient



Semelle intérieure amovible



Pour les diabétiques



Poids plume

