

# Die neue Body Armor® Embrace Sprunggelenksorthese von DARCO.

Optimale Stabilität bei gezielter Mobilität!




Jetzt neu!

- > posttraumatische und präventive Versorgung
- > anatomisch perfekte Passform
- > individuell anpassbar
- > physiologisch korrekte Fußbewegung
- > hilft einen Talusvorschub zu verhindern



**DARCO**

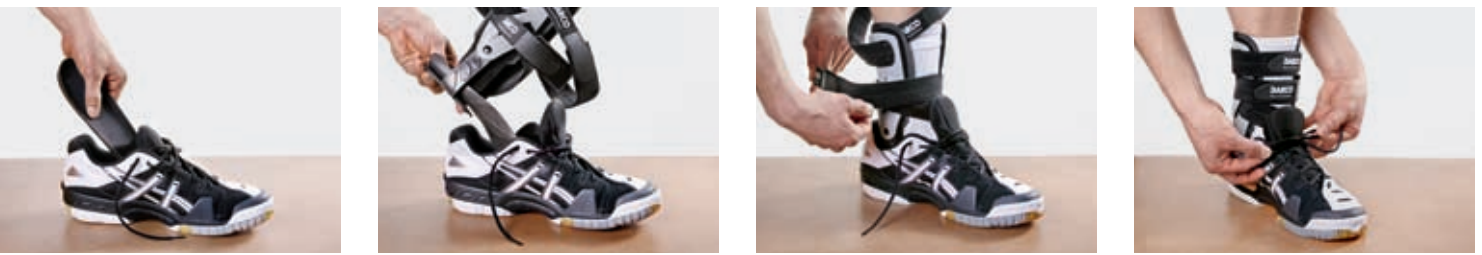

#### 1. Stabilitätselemente

Perfekte Passform durch anatomisch richtig geformte Stabilitätselemente.

#### 2. Orthesensohle

Mehr Platz im Schuh durch die verkürzte Orthesensohle.

#### 3. DARCO Y-closing-system

Individuell anpassbare Bänder durch das DARCO Y-closing-system.

#### 4. Talus Shift Band

Sicherung des vorderen, äußeren Bands am Sprunggelenk (FTA) durch das Talus Shift Band von plantar/lateral nach dorsal/medial. (Hilft einen Talusvorschub zu verhindern.)

#### 5. Drehgelenke

Physiologisch korrekte Fußbewegung durch die parallel zueinander stehenden und somit anatomisch richtig liegenden Drehgelenke.

Freie Dorsalextension und Plantarflexion möglich.

## Body Armor® Embrace

Die Body Armor® Embrace ist eine Sprunggelenksorthese, die sowohl in der akuten Verletzungsphase als auch in der Rehabilitationsphase zum Einsatz kommt. Der untere Bereich der Einlage (soft-pad) dient in erster Linie zur Abpolsterung des verletzten Knöchels und kann nach der Abheilung an der Markierung abgeschnitten werden. Zwei Klettverschlüsse sorgen für einen angenehmen weichen, aber sicheren Halt. Das Talus Shift Band hilft einen Talusvorschub zu verhindern. Die geschwungene Form der Fußbügel trägt zu hohem Tragekomfort und somit zu einer erhöhten compliance des Anwenders bei.

### Indikationen

- > Distorsionstraumata des oberen Sprunggelenks
- > Insuffizienz des Kapselbandapparates des oberen Sprunggelenks
- > Prävention gegen chronische Instabilität

| Artikelnr. | Farbe        | Größe |           |
|------------|--------------|-------|-----------|
| links:     |              |       |           |
| EB1B-L     | Schwarz-Grau | S     | 35,0–39,0 |
| EB2B-L     | Schwarz-Grau | M     | 40,0–44,0 |
| EB3B-L     | Schwarz-Grau | L     | 45,0–49,0 |
| rechts:    |              |       |           |
| EB1B-R     | Schwarz-Grau | S     | 35,0–39,0 |
| EB2B-R     | Schwarz-Grau | M     | 40,0–44,0 |
| EB3B-R     | Schwarz-Grau | L     | 45,0–49,0 |